

Shine Pure
取扱説明書
音波電動歯ブラシ
Sonic Electric Toothbrush



製造者：AFHYOO HOLDING
GROUP CO., LIMITED
日本総代理店：東恒株式会社



重要事項

△危険

- 充電時、充電台は水に濡らさないでください。
- 充電台が濡れた場合は水をよく拭き取り乾いてから充電してください。
- 定期的にはブラシヘッドにひびが入っていないか確認してください。
- ブラシヘッドにひびが入ってしまった場合は、そのまま使用せず必ずブラシヘッドを交換してご使用ください。

△警告

- 充電ケーブルが破損した場合は危険ですので充電器につながないでください。
- 充電器が壊れた場合は必ず同じモデルの充電器と交換してください。
- 製品の一部（本体、ブラシヘッド、充電器など）が破損した場合は直ちに使用を中止してください。
- 充電器は直射日光の当たる場所や火気付近など高温になるところで使用しないでください。
- 使用しない時は子供の手の届かないところに保管してください。

△注意

- 2か月以内に口腔内は歯周病の手術をされた方は使用前に歯科医師にご相談ください。
- 本製品をご使用中に歯茎から出血した場合その出血が一週間以上続く場合は歯科医師にご相談ください。
- 口腔内の感覚が敏感な方は使用前に歯科医師にご相談ください。

- 本製品は電磁機器の安全基準に適合しておりますが心臓ペースメーカー植込み型除細動器など使用の方は使用前に医師にご相談ください。
- 本製品は歯と歯茎と舌の洗浄のために設計されています。記載されている以外の目的での使用はしないでください。痛みや不快感が生じた場合は速やかに使用を中止し歯科医師にご相談ください。
- 本製品は（本体、ブラシヘッド、充電器など）は食器洗浄機や乾燥機、電子レンジで洗浄乾燥はしないでください。

安全上のご注意

- ここに示した内容は製品を安全に正しく使用いただき、使用者や他人々への危害、財産への損害を未然に防ぐためのものです。お使いになる前に必ずお読みください。

■安全に使用していただくために必ずお守りください

- お使いになる人、他の人への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。
- 誤った取り扱いをすることで生じる危険や損害の程度を、下記の表示（図記号と用語）で区分し、説明しています。

△警告	誤った取り扱いをすることで使用者が死または重傷を負う可能性が想定される「内容」を説明しています。
△注意	誤った取り扱いをすることで傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される「内容」を説明しています。

- お守りいただきたい内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

⊙	⊙ 記号は、禁止（してはならないこと）を告げるものです。
❗	❗ 記号は、行為を強制（しなければならない）を告げるものです。

△危険

- ⊙ この製品には充電式（バッテリー）が内蔵されています。火の中に入れたり加熱したり、高温多湿の場所で充電したり使用したり保管したりしないでください。発熱、発火、爆発の原因となります。

△警告

- ⊙ 異常な故障が発生した場合は直ちに使用を中止し、電源コードを抜いてください。
- ⊙ 下記のような異常又は故障の場合、本体や充電器が変形したり異常に発熱した場合は、
 - ・本体や充電器から強いような臭いがする。
 - ・本体や充電器の使用中止または充電中に異常な音が出る。このような場合はアフターサービス窓口までお問い合わせください。

❗ 充電する前には必ず電源の電圧が定格電圧が確認してください。火事や感電、ショートなどにつながる可能性があります。

❗ 電源プラグにはこりが溜まらないように定期的に掃除してください。

- ❗ この製品はお子様の手の届かない所に置き、お子様だけの使用は避けてください。使用時には保護者は製品の使用を監視及び指導し安全に使用させてください。なお、この製品を誤って取り扱わないようにしてください。事故やけがの原因となります。
- ❗ 充電ケーブルが破損した場合、充電器の使用を中止し交換してください。事故やけがの原因となります。

❗ 充電器の上部に金属の物（コインやクリップなど）を置かないでください。火事の原因となります。

❗ 水の中に長時間浸さないでください。本体が壊れる恐れがあります。

❗ 清潔な手で本体を試かないでください。本体が変色する恐れがあります。

△警告

- ⊙ 製品を廃棄するときは分解しないでください。火事やけがの原因となります。
- ⊙ 子供の手の届くところに保管しないでください。誤って可動、パーツを誤飲するなどの事故やけがを引き起こす可能性があります。

⊙ 付属の充電器で他の製品を充電しないでください。ショートによる火傷や火事の原因となります。

△注意

- ❗ しばらく使用しない場合、家庭用コンセントから電源プラグを抜いてください。漏電や感電や火事の原因となる可能性があります。

⊙ 歯周病や歯の病気または口腔疾患の疑いのある人は使用前に歯科医師にご相談ください。

△注意


- ⊙ 本体やブラシヘッドの下のプラスチック部分を固く割れさせないでください。歯内歯茎を傷つける原因が及びます。
- ⊙ ブラシヘッドの毛の硬さと生れ込みで、敏感な歯茎や歯肉を刺激することがあります。

⊙ 充電器の上部に金属の物（コインやクリップなど）を置かないでください。火事の原因となります。

⊙ 水の中に長時間浸さないでください。本体が壊れる恐れがあります。

⊙ 清潔な手で本体を試かないでください。本体が変色する恐れがあります。

各部の名称

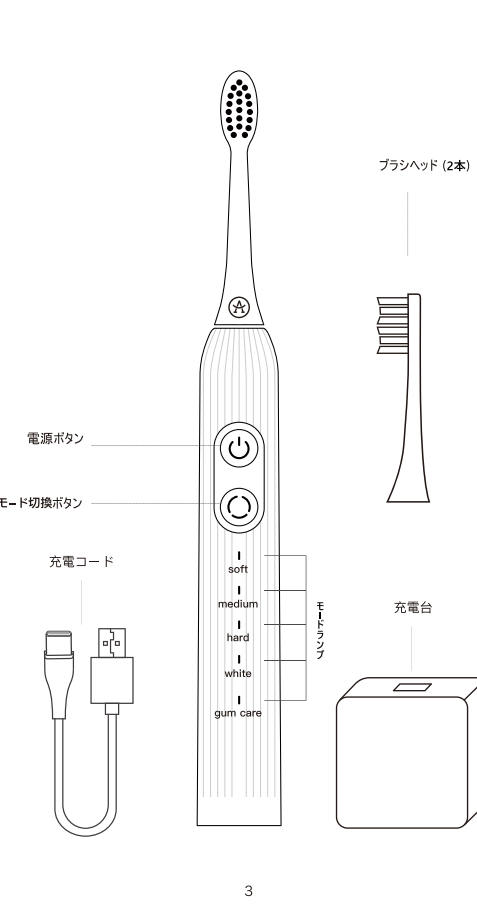

使用説明

1. ブラシヘッドを本体にしっかりと差し込んでください。（図①）
 - ・ ブラシヘッドを取付時、傾けたりひねったりし挿入するとブラシヘッドまたは本体が破損する可能性があります。ブラシヘッドと本体の間に一定の隙間があります。正常な状態です。（図②）
2. 歯ブラシを口に入れます。
 - ・ ブラシに少量の歯磨き粉を乗せた後に電源をつけてください。（図③）
3. モード切替ボタンを押してモードを選択。
 - ・ モード切替ボタンを押すたびにモードが切替わります。ブラシヘッドを強く歯に押し当てると音が大きくなりますが、故障ではありません。歯ブラシは優しく歯にあててください。
4. 使用後は必ず本体の電源をオフにしてください。
 - ・ 歯磨き粉が飛び散らないように口の中で本体の電源をオフにしてください。


モード説明

- P9音波電動歯ブラシは5段階のモードが選べます。
- ① ソフトモード（初心者モード）：振動回数は1分間に約33000回で、音波電動歯ブラシを初めて使う人に適しており、通常の自動歯ブラシからスムーズに移行出来る優しいモードです。振動による清掃効果を体験できます。
- ② ミディアムモード：振動回数は1分間に約36900回のノーマルなモードで、少し使い慣れたもう少し強さが欲しい時などに適したモードです。長期的に歯茎の弱い方、歯茎の腫れ痛みのある方に向けるモードです。長期使用することで歯石や歯垢に気にならなくなります。
- ③ ハードモード：振動回数は1分間に約39800回の強めなモードです。音波水流が口腔内の隅々まで効果的に動かし、歯の隅の隅まで汚れを取り除くのに適したモードです。歯の表面にフォーカスし長期使用で歯面に付着した汚れを取り、自然な白さに。
- ④ ホワイトモード振動回数は1分間に約42000回、歯の隅の隅に当たるモードで、特に白く、清潔な歯にしたい方におすすめのモードです。歯の隅の隅に当たるモードで、特に白く、清潔な歯にしたい方におすすめのモードです。
- ⑤ ガムケアモード：振動回数は約33000～42000回の範囲で変動。強弱を繰り返す歯と歯茎をリラックスさせるモードです。加齢や外的要因による歯茎の退縮を防ぎ、自宅での歯茎ケアのようなケアを簡単感覚です。

機能説明


- ・ スロースターター機能
電源を入れてから最初の3秒間は振動幅を小さく設定、4秒以降より本来のモードの動きに変わっていきます。手元でスタートしてから口の中に持っている間の歯磨き粉の飛び散りを防ぐための機能です。歯磨きが完了するまで待たなくても故障ではありません。
- ・ モードメモリー機能
使用しているモードが5秒以上経くと、次の起動時にそのモードからスタートします。
- ・ 2分後タイムアウト
30秒に一回止まり4ヶ所のブラッシングを計2分、その後自動的に止まります。（これは歯科医師が推奨する時間です。）

ブラッシング時間

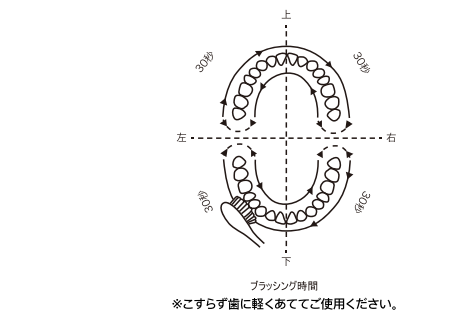

- ・ 使用時30秒に一回一時的に停止します。それにより上下左右4ヶ所のブラッシングエリアを変えるよう通知します。
- ・ 口腔内を均等にブラッシングでき、より良い洗浄効果が得られブラッシングの習慣も身に付きます。
- ・ 口腔内の清潔を守るためブラシヘッドは3か月を目安に交換してください。

ブラシヘッドと本体のクリーニング

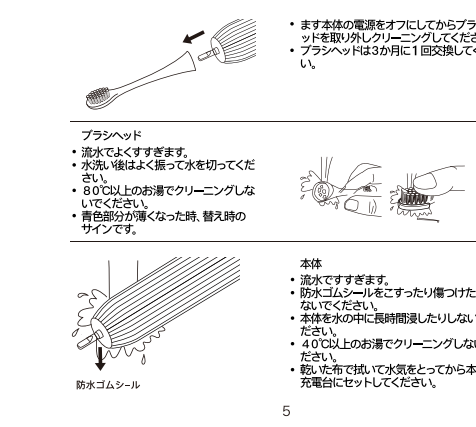

歯ブラシの保管と充電

- ・ 初めての使用（購入したばかり、または3か月以上使用しなかった場合）や充電がなくなった時には本体を充電してください。
- ・ 充電時の環境温度は0℃～40℃です。温度が高すぎたり、低すぎたりするとバッテリーが正常に充電されない場合があります。
- ・ この製品の充電器台は過充電防止機能付きですので使用されない時にいつでも置いていただくことができます。そのため安全に十分な電力を維持することができます。
- ・ 本体は使用中及び充電中に熱くなることがあります。
- ・ バッテリー残量が少なくなった時は速やかに本体を充電してください。

充電注意事項

- ・ ワイヤレス充電：充電時間は7時間です。
- ・ 充電中：充電インジケータが点滅します。（遅い点滅）
- ・ 充電完了：充電インジケータが点滅します。
- ・ 充電のお知らせ：残容量が少なくなると、充電インジケータが点滅します。（速い点滅）（1日2回の使用で約120日お使いいただけます）

仕様

品番	P9	入力電圧	DC 5V
消費電力	1.5W（充電時）	定格電圧	3.7V
充電電池種類	リチウムイオン蓄電池	重量	約110g
防水性	IPX 7（防水規格）		
製品サイズ	28 × 28 × 252 mm		

廃棄処理

- ・ 製品を廃棄するときは、一般家庭ごみと一緒に捨てないでください。環境保護のため各自自治体のリサイクル方法に従ってください。分解しての廃棄はおやめください。

保証規定とアフターサービス

- 保証期間内の製品の保証（無料保証）は購入日から実施されます。
- 1. 保証期間中の故障に対してアフターサービス窓口へご連絡ください。保証の際、保証書と購入証明をご提示ください。次の2点に特に注意してください。
- ① 当保証書は紛失後の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- ② 当保証書は日本でのみ有効です。

- 2. 当保証書有効期限はご購入後1年間です。通常の使用で故障が発生した場合のみ保証をいたします。
- ① 消耗品は保証の対象外です。
- ② 無料保証サービスには、送料やその他のサービス料金は含まれておりません。
- ③ 保証期間終了後の無料での保証サービスの受付はしておりません。

- 3. ご購入後7日以内の使用時の品質不良の場合、往復送料は当社負担とさせていただきます。一旦弊社に返送いただき、修理後、弊社がお客様がお支払いされた送料をご返金させていただきます。着払いでは受付できません。

- 4. 以下の場合、保証期間中でも無料保証は受けられません。
- ① 傷、擦り傷、変色、色あせなど、製品の通常の摩擦などの場合。
- ② 通常の使用、メンテナンス、保管および損傷など製品の取り扱いについて取扱説明書に記載されている以外の目的での使用をされた場合。
- ③ 落下またはその他の人為的原因による損傷の場合。
- ④ 弊社指定外修理店による無断分解による破損の場合。
- ⑤ 保証書と有効な購入証明書を提示できない場合。
- ⑥ 保証書に記載された情報が製品と一致しない、または人為的に変更された場合。
- ⑦ 自然災害による製品の損傷の場合。

- 5. この保証条項は、個人が購入および使用する場合にのみ適用され、産業用、商業用などには適用されません。

※アフターサービスについて
修理に関するご相談および不備点、お買い上げの販売店または「東恒株お客様相談窓口」へお問い合わせください。

P9 Shine Pure 音波電動歯ブラシ保証書	
この度は、Shine Pure 音波電動歯ブラシをお買い求めいただきありがとうございます。製品は厳重な検査を行い高品質を確保しております。しかし、通常のご使用において万一不具合が発生しました時には、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償にて修理または交換させていただきます。	
品名	Shine Pure 音波電動歯ブラシP9
保証期間	ご購入日より 1年間
お買上日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前 様
販売店	電話番号
輸入者（発売元） 愛知県名古屋市長区高辻1-89 第2東昭ビル3F 東恒株式会社 「お客様相談窓口：0570-056-660 info@tokoh-group.co.jp」	

※ご購入に関してのご注意
保証を受ける場合には正規販売店発行の領収書（レシート）等の購入年月日・購入店名・購入製品が確認できるものが必要となります。
正規販売店以外で買い上げいただいた場合、保証の対象外となりますので、ご注意ください。
お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますのでご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。