

medisana®

MDS-003

ハイパーリフレ・プロ

Hyper Refre Pro

説明書

本品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。大切に保管し、必要に応じて参照ください。

バージョン V1.0

Hyper Refre Pro

說明書

本品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。大切に保管し、必要に応じてご参照ください。

バージョン V1.0

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、貴方や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

	危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の財物に損害を与えたりすることがあります。
絵表示の例	 気を付けてください 「注意喚起」です	 必ず実行していただく 「強制」内容です

お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに保管してください。

<免責事項について>

- 地震や水害などの天災および当社への責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故障または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 外観仕様は製品の改良等により予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。

② 次のような医療電気機器や家庭用電気治療器を使用している方は使用しないでください。

- ・ペースメーカーなどの体内挿込み型医療用電気機器
- ・心電計などの装着型の医用電気機器

医療電気機器や家庭用電気治療器の誤作動を招く恐れがあります。

医師の治療を受けている時や次の方は必ず医師に相談の上、使用してください。

次の当てはまらない場合でも、使用に不安がある方は医師に相談の上、使ってください。

- ・ 血圧に異常のある方
- ・ 悪性腫瘍のある方
- ・ 心臓に障害のある方
- ・ 脳神経に異常を感じている方(てんかんなど)
- ・ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- ・ アルペギ一体系で特に肌が敏感な方
- ・ 製品使用部位に皮膚病のある方、またはあった方
- ・ 血行障害のある方
- ・ 骨粗しょう症の方
- ・ ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
- ・ 安静を必要とする方
- ・ 医師に運動を禁じられている方、制限されている方
- ・ 薬を服用中の方
- ・ 発熱(38℃以上)している方
- ・ 紫斑になりやすい方
- ・ 背骨に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方
- ・ 皮膚に知覚障害や異常(感染症、皮膚炎や傷など)のある方
- ・ 過去に治療や手術(形成、整形、美容など)を受けた部位へ使用する方

事故や健康を害する恐れがあります。

○ 次の方は使用しないでください。

- ・ 乳幼児や子供
- ・ 意思表示ができない方、操作が行えない方
- ・ ご自分で取扱説明書の内容を理解できない方
- ・ 飲酒している方

- 次のような部位には使用しないでください。
 - ・ 心臓周辺部位
 - ・ 頭部、顔、鼻などの骨部、耳、目とその付近、首の前側
 - ・ 背骨(腰椎、胸椎、頸椎)、陰部、関節
 - ・ 怪我をしている部位
 - ・ 赤みなどの炎症のある部位
 - ・ 事故やトラウマのトラウマの原因になります。
- 本製品は、治療などを目的とする医療機器・治療器・マッサージ機ではありません。一般家庭用のボディケアマシンです。取扱説明書に記載されている用途以外で使用しないでください。
事故やトラウマの恐れがあります。
- 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因になります。
- 絶対に改造・分解修理しないでください。
感電、事故および故障の原因になります。
- 他の機器との同時使用はしないでください。
健康を害する恐れがあります。


① 高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）、ほこりっぽい場所での使用や放置はしないでください。
発熱・発火・破裂の原因になります。

② サウナや岩盤浴へ持ち込んで使用しないでください。
故障の原因や、本体が高温になり、けがや火傷のおそれがあります。

- ⊖ 濡れた手で充電ケーブルの抜き差しをしないでください。
感電のおそれがあります。
- ⊖ 充電ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
おぼつかないうちにはずさないでください。また、重いものを乗せたり、挟み込んだり、高温部に
近づけたりしないでください。
- ⊖ 充電ケーブルが破損し、火災や感電の原因になります。
- ⊖ 本体および付属品から煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱しているような異
常がおきたら直ちに電源を切り、使用を中止してください。
破損や発火の原因になります。
- ⊖ 本体を落としてたりぶつけたりして破損したら、使用しないでください。
けがや故障のおそれがあります。
- ⊖ 故意に力を加えて無理に運転を止めないでください。
けがや故障のおそれがあります。
- ⊖ お手入れをする時は、ペンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、
磨料などは使用しないでください。
感電や引火、故障のおそれがあります。
- ⊖ 充電ケーブルに水をつけたり、浴室など湿気の多い場所での充電や保管はしないでください。
感電・ショートや故障の原因になります。
- ⊖ 傷んだ充電ケーブル、ゆるんだコンセントは使用しないでください。また、ACアダプ
タの電源プラグに接続した後は引き取ってください。
火災や感電・ショートの原因になります。

- 使用前に本体および付属品に破損がないか確認をしてください。
破損している場合は使用しないでください。
- ❗ 使いはじめや敏感肌の方は、お肌の様子を見ながら弱いレベルから使用してください。
肌や身体トラブルの原因になります。
- ❗ 身に付けているアクセサリーや貴金属類は外してから使用してください。
怪我をするおそれがあります。
- ❗ 1部位1回5分以内、1日合計30分以内を目安に使用してください。
過度の使用は肌を痛める原因になります。
- ❗ 充電ケーブルのUSBコネクタはACアダプターの根元まで確実に差し込んでください。
Type-Cコネクタは充電ケーブル差込口の根元まで確実に差し込んでください。また、
ACアダプターの電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火による火災の原因になります。
- ❗ アタッチメントを前に強く押し付けたり、長く同じところに当て続けたりしないでください。
肌トラブルの原因になります。
- ❗ 使用中に痒みや不調など異常を感じた時は、直ちに使用を中止してください。使用后、
肌に異常を感じた時は医師に相談してください。
健康を書したり症状の悪化につながるおそれがあります。
- ❗ 治療を受けている人は、治療部位の使用を控えるか部位をすらしめて使用してください。
強い違和感を感じる場合は医師に相談してください。
- ❗ 使用後は必ず本体やアタッチメントの汚れやほこりをしっかりと拭き取り、浴室など高温多湿の場所に放置しないでください。
- ❗ 充電する時は本体やアタッチメントが完全に乾いていることを確認してから、充電ケーブルを差し込み口に差し込んでください。
ジョークなどによる異常発火や火起こし・故障の原因になります。
- ❗ 低速時は使用部位や負荷のかかり方によって動作が停止しやすくなる場合があります。
- ❗ 停止する場合は身体を強く押し付けず、負荷を軽減するか、身体に無理のない範囲で速度レベルを調整してご使用ください。
- ❗ 本商品の耐荷重量は90kg以下で設計されています。
90kg以上の体重の方のご使用はお控えください。

ご使用方法（※ボールヘッドを取り外してもお使いいただけます）

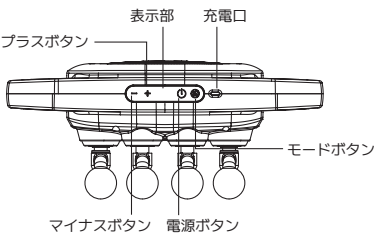

電源ボタン

電源オン：電源ボタンを長押しすると、表示部に00が表示されます。プラスボタンを押すと作動を開始します。

電源オフ：マシンが作動している状態で、電源ボタンを長押しすると動作が停止します。

※電源ボタン後に作動を開始させないと約20秒で電源がオフになります。

モード切替: 電源オン後、モードボタンを押すとモードを切り替えます。
全3モードで、各モードに切り替えるとディスプレイにはF1、F2、F3が表示されます。(F1モード: お好みの速度で作動、F2モード: 早い!遅いの繰り返し、F3モード: 作動!停止の繰り返し)
※電源オン時はF1、プラスボタンを押さないで作動しません


プラスボタン
長押し：連続して速度がアップしていきます
短押し：1段階ずつ速度が上がります
最大30段階で、ディスプレイには1~30が表示されます。

マイナスボタン
 長押し：連続して速度がダウンしていきます
 短押し：1段階ずつ速度がダウンしていきます
 最低1段階で、ディスプレイには1~30が表示されます。

オートタイマー
約15分で自動的に停止します。

充電
お手持ちのACアダプターに付属の充電ケーブルを差し込み、本体充電口に接続してからコンセントに差し込んでください。

充電中：表示部点滅	充電時間：約5時間
充電完了：表示部点灯	使用可能時間：通常使用時約50分

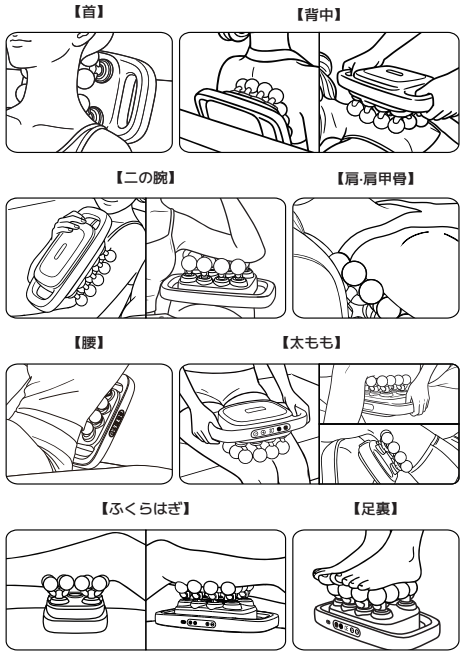

注意
品稼働時、指が狭まったり衣類が引っかかったりしないよう注意してご使用ください。
ローリングなどの硬い床の上に置いて使用する場合は、振動が伝わらないようカー
ペット等を敷いてご使用ください。



- ① 電源を切り、本体からアタッチメントを取り外します。
※アタッチメントが破損しないように、やさしく取り外してください。
- ② 本体とアタッチメントについている汚れを乾いたやわらかい布で拭き取ります。
- ③ 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってから、乾いたやわらかい布で拭いてください。
- ④ 風通しの良い場所で陰干しして、十分に乾かします。

△ 必ず動作を停止させてから行ってください。

△ ドライヤーやファンヒーター、乾燥機などで本体や付属品を乾かさないでください。

△ ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない

ごくたさい。

△ 子供の手の届かない場所に保管してください。また、高温多湿な場所やほこりっぽい場所を避けて保管してください。

故障かなと思ったら下記の点をもう一度点検してください。それでも正常に動かない時はお買上げの販売店にご連絡ください。絶対にご自身で分解したり、改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

症状	考えられる理由	解決策
電源を入れても動かない	十分に充電されていない	再度充電を行ってください。
	充電中	充電完了後に使用してください。
充電できない	充電ケーブルやACアダプターの正しく接続されていない	充電ケーブルやACアダプターを正しく接続してください。
使用中に停止する	オートタイマーにより約15分で自動的に停止します	異常ではありません。
	安全装置により停止した	再度電源を入れてください。
	バッテリーが少なくなっている	再度充電を行ってください。

1. 図のように位置1のボールヘッドを引き抜きます。
2. ドライバーを使用して、図のように位置2の12本のネジを取り外し、マシン上カバーを開けます。
3. ドライバーを使用して、図のように位置3の4本のネジを取り外し、バッテリープレートを取り外します。
4. バッテリープラグを見つけ、プラグを抜き、バッテリーを取り外し、規定で廃棄してください。

機器を廃棄する前に、バッテリーを機器から取り外し、適切に分別する必要があります。

品 名	ハイパーリフレ・プロ
品 番	MDS-003
電 源	充電式
定 格	5V/2A
使用電池	リチウム電池 11.1V 1800mAh
消費電力	35W
本体寸法	W32*D17.5*H13.5cm
本体重量	正味重量 / 総重量 : 1.35kg / 1.65kg
材 質	本体材質 : ABS・シリコン、ボールヘッド材質 : EVA
付 属 品	本体、充電ケーブル、取扱説明書
使用環境	環境温度5℃～40℃
原 産 国	中国

※外観仕様は製品の改良等により予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本体

説明書
(保証書付)

充電ケーブル

ご購入商品名	ハイパーステップ・プロコ
無料保証期間	お買い上げ日より1年間

本書は上記「無料修理保証期間」中に発生した場合、下記により無料修理を約束するものです。

1. 製品お買い上げ時において、既に破損等、不良箇所等が認められた場合。
2. 取扱説明書に基づき取扱い、自然破損、故障等発生した場合(虫し、鼠し、猫し等指定外での取扱い等による破損、故障や事故による破損、地震、火災等の天災地変による破損等)の場合は適用しません。
3. 一般家庭用としてご使用の場合。
4. 本製品は、日本国内においてのみ有効です。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any country.No servicing is available outside of Japan.

●以上の条件を満たさない場合は、有料での修理はお受けいたしますが、無料での修理はお受け致しかねます。

販売店員

店 名		TEL
住 所		
お買い上げ日と月		

*事情により記載できない場合がございますので、その際は契約書シート等、お買い上げ日とわかる書類を貼つて保管してください。

発売元：〒171-0021 東京都西葛区西池袋3-17-15
株式会社MITSUBISHI JAPAN

お問い合わせはこちらまで
TEL 03-6907-1890
株式会社MEDISANA JAPAN
平日10時～17時受付（土・日・祝祭日、当社の休日を除く）
info@medisana.co.jp

お客様がパートナーにおけるお客様の個人情報をお取扱いについて

- 当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名住所などの情報(以下「個人情報」)を下記のとおり取扱います。
- 当社はお客様の個人情報、当社商品の取扱いへの対応や修理およびその確認に利用させていただきます。これらの目的のためにこのご相談内容の記録を保持することがあります。なお、修理やその確認業務に当社の協力者が委任される場合、法令に基づく必要情報は相關の行役の必要に必要場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を適切に保護します。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お客様サポートにご連絡ください。